


Columna de Adsorción de Bilirrubina Desechable

Descripción

La columna desechable de adsorción de bilirrubina está diseñada para el tratamiento de la hiperbilirrubinemia causada por enfermedades como insuficiencia hepática (IHA) y hepatitis. Utiliza una resina de intercambio aniónico porosa para eliminar bilirrubina directa e indirecta del plasma del paciente mediante plasmaféresis.

Uso

- Tratamiento coadyuvante para la hiperbilirrubinemia.
- Adsorción plasmática para eliminar bilirrubina y mejorar el pronóstico del paciente.

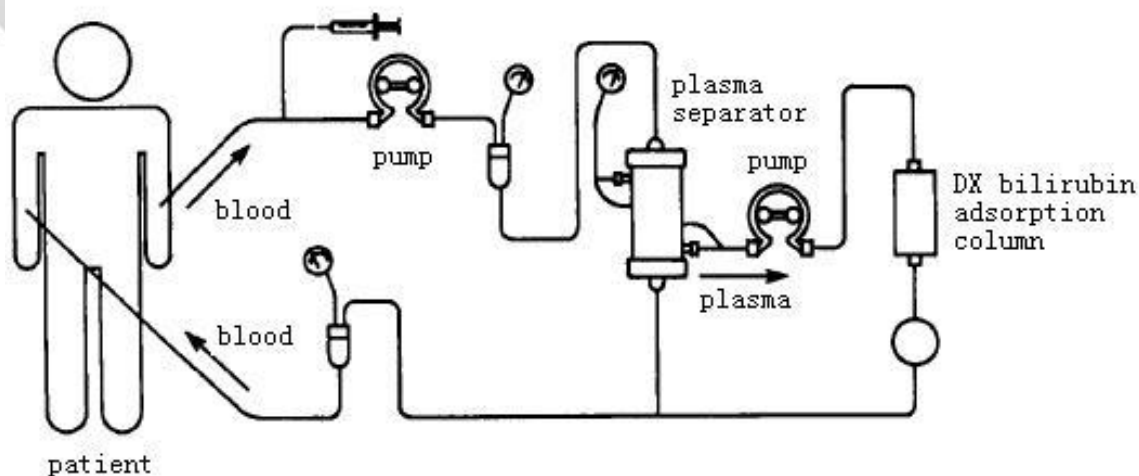

Contraindicaciones

Sin contraindicaciones.

Composición

Componentes de polipropileno, policarbonato, goma de silicona, resina de intercambio aniónico, y solución de conservación con agua inyectable estéril.

Clasificación

Clase II B según el reglamento (UE) 2017/745

Especificaciones Técnicas

- DX150: volumen adsorbente ≥ 135 ml
- DX250: volumen adsorbente ≥ 225 ml
- DX350: volumen adsorbente ≥ 315 ml
- Flujo de sangre: 50-150 ml/min
- Flujo de plasma: 20-45 ml/min
- Duración de uso: 120-240 minutos.

Descripción funcional:

- Carcasa transparente, superficie lisa.

Rendimiento:

- Adsorción de bilirrubina ≥ 0.8 mol/ml, de ácidos biliares ≥ 0.3 mol/ml.
- Tasa de adsorción de proteínas: $< 12\%$
- Tasa de adsorción de electrolitos: $< 5\%$
- Endotoxinas bacterianas: < 0.5 EU/ml

- Estabilidad térmica: 0-50°

Descripción del empaque

Empaque primario individual en blister y secundario en caja individual, caja contienen 20 uds.

Esterilización

Vapor en autoclave (121°C, 20 min.)

Vigencia (vida útil)

Duración de 2 años desde la fecha de esterilización, siempre que el empaque permanezca intacto y en condiciones adecuadas de almacenamiento.

Almacenamiento y Transporte

Lugar seco, ventilado, entre 1-40°C, HR <80%

Advertencias

- Uso único, esterilizado y libre de pirógenos.
- Solo para médicos con experiencia en purificación sanguínea.
- No reutilizar.
- No usar en embarazadas ni durante resonancia magnética.



COPIA NO CO

Realizado por: Área Comercial	Revisado por: Ejecutiva de Ventas	Aprobado por: Gerencia Comercial
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------